





دستگاه HDT/Vicat

- 1- پوشه نصب نرم افزار را دانلود کنید.
- 2- فایل نصب زیر را اجرا کرده و گزینه Run as administrator را انتخاب کنید.

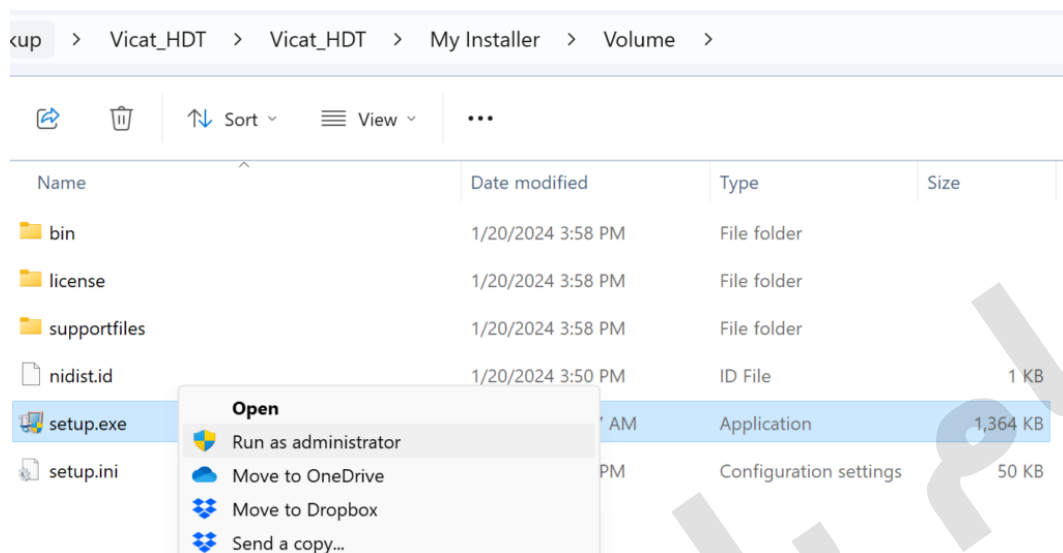

3- نرم افزار را در مسیر پیش فرض نصب کنید و مسیر نصب را تغییر ندهید.

4- از منوی Start برنامه را با دسترسی Administrator اجرا کنید.

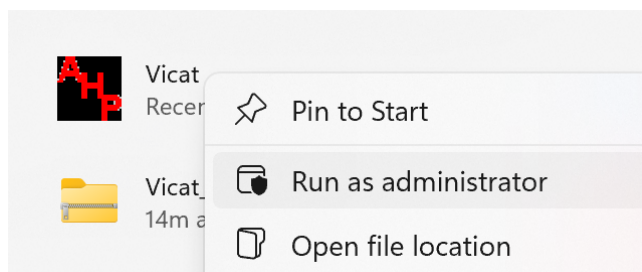

5- سپس فایلی با نام VICAT.dat در ریشه درایو C: مشاهده خواهید کرد. این فایل، فایل کالیبراسیون نرم افزار است. هر بار که در نرم افزار روی Quit کلیک می کنید، تمام پارامترهای کالیبراسیون و تنظیمات در این فایل ذخیره می شوند. توجه داشته باشید که نرم افزار را همیشه با دسترسی Administrator اجرا کنید؛ در غیر این صورت پارامترهای کالیبراسیون و تنظیمات در این فایل ذخیره نخواهند شد.

6- در مرحله بعد باید درایور ارتباط نرم افزار با دستگاه را نصب کنید. به لینک زیر مراجعه کرده و دستورالعمل نصب را دنبال کنید.

[نصب HDT Vicat](#)

7- در مرحله قبلی، بخش های مربوط به Hardware Lock را نادیده بگیرید، زیرا نسخه نرم افزار شما Free-Lock است.

8- برای دریافت پشتیبانی آنلاین، یکی از نرم افزارهای اتصال از راه دور مانند Supremo، AnyDesk یا TeamViewer را روی رایانه خود نصب داشته باشید و از طریق خط واتساپ 90 546 918 0483 + با ما تماس بگیرید.