

AHP نصب نرم افزار تست کشش



دستگاه آزمون کشش یونیورسال

دستگاه کشش تک ستونه



دستگاه آزمون کشش افقی

نرم افزار آزمون کشش در پوشه نصب زیر قرار دارد:
1- روی پوشه My Installer کلیک کنید.

 AHP Tensile N


☒  My Installer

2- روی پوشه Volume کلیک کنید.

☒  Volume

Date created: 5/21


3- روی Setup.Exe کلیک راست کرده و گزینه «run as administrator» را انتخاب کنید.

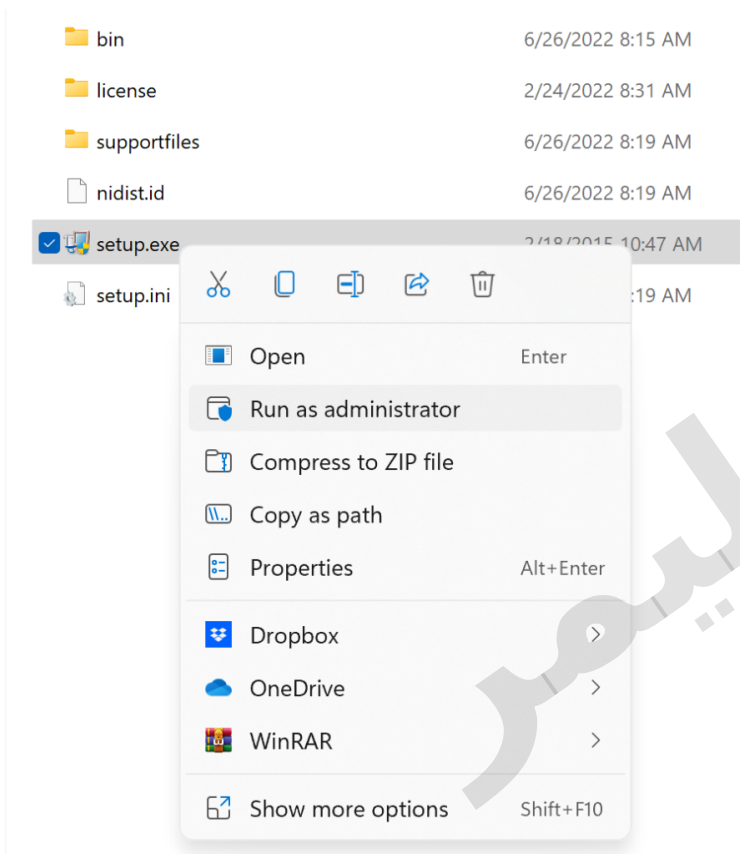

- 4- سپس نرم افزار را در مسیر پیش فرض نصب کنید. لطفاً مسیر پیش فرض نصب را تغییر ندهید.
- 5- در مرحله بعد، باید درایور ارتباطی را نصب کرده و نام پورت صحیح را در نرم افزار تنظیم کنید.
- 6- برای نصب درایور به لینک زیر مراجعه کنید:


[نصب درایور](#)

- 7- شماره پورت را مطابق شماره پورت نرم افزار آزمون کشش، طبق توضیحات لینک بالا، تنظیم کنید.
- 8- پس از انجام این تنظیمات، هنگام اجرای نرم افزار باید علامت تیک سبز رنگ زیر را در نرم افزار مشاهده کنید:

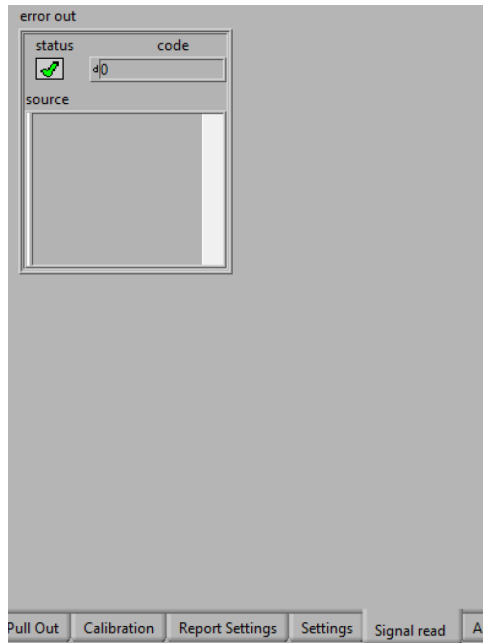

9- اگر Windows دارای معماری 64bit باشد، پس از نصب نرم افزار باید کل پوشه نصب را از مسیر "C:\Program files(X86)" به مسیر "C:\Program files" کپی کنید. در غیر این صورت، هنگام اجرای نرم افزار با خطای قفل سخت افزاری مواجه خواهید شد. اگر قفل سخت افزاری خود را از دست بدهید، باید قفل جدیدی از تیم فروش دریافت کنید.

10- نرخ Baud برابر با 9600 است و در برخی از دستگاه های آزمون کشش ما برابر با 152200 است. تأخیر خواندن سیگنال 20ms است.

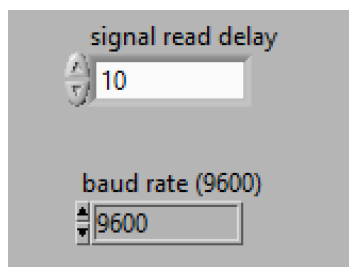

11- پس از نصب صحیح، تنظیم درست پورت COM و برقراری ارتباط مناسب، زمان هر مرحله از نرم افزار حدود 150-200ms خواهد بود. این زمان به نسخه برد و فرکانس نمونه برداری برد بستگی دارد. در برخی از محصولات ما، این زمان بر اساس این پارامترها متفاوت خواهد بود.

12- برای راهنمای استفاده از نرم افزار، به راهنمای نرم افزار دستگاه آزمون کشش AHP مراجعه کنید.

13- ترجیحاً از پورت USB3 استفاده کنید.

14- باید یک نسخه پشتیبان از فایل کالیبراسیون نرم افزار خود داشته باشید. در دستگاه های آزمون کشش محصولات AHP، فایل کالیبراسیون با نام "Tension1.dat" در درایو ریشه "D" قرار دارد. پس از نصب صحیح نرم افزار و پیش از اجرای آن، فایل پشتیبان کالیبراسیون را در درایو D کپی کرده و سپس نرم افزار را اجرا کنید. به این ترتیب، نرم افزار با پارامترهای کالیبره شده اجرا خواهد شد. این فایل کالیبراسیون را همیشه در مکانی امن نگهداری کنید؛ در غیر این صورت، باید فرایند کالیبراسیون را دوباره انجام دهید که زمان بر و پرهزینه است.